

L15 HD3

L'échographie
haute fréquence.
La liberté du sans-fil.

Voir les structures
superficielles.
Accompagner le geste.

Une sonde linéaire portable associée
à une application mobile pour vos
examens au point de soin.



5-15 MHz

Plage de fréquence

7 cm

Profondeur maximale

290 g

Poids de la sonde

SPÉCIALITÉS ET DOMAINES D'UTILISATION

Orthopédie • Sport • Rééducation • Rhumatologie
Anesthésie • Sénologie • Thyroïde • Accès vasculaire

Votre modèle, en détail.

Toutes les rubriques de cette brochure sont réunies dans ce PDF. Cliquez sur une rubrique pour accéder à sa page.

- 03** Technologie et qualité d'image
- 04** Applications cliniques
- 05** Spécialités et exemples d'usage
- 06** Applications et préréglages
- 07** Modes avancés et intelligence
- 08** Application et commandes
- 09** Cloud, partage et DICOM
- 10** Mobilité, entretien et accessoires
- 11** Caractéristiques et offre
- 12** Formation, démonstration et sources



L15 HD3

Linéaire haute fréquence

5-15 MHz


7 cm de profondeur maximale

Préparer votre équipement

Prévoyez un téléphone ou une tablette compatible, l'application Clarius, la sonde chargée et les accessoires adaptés à vos examens. Le Cloud et la collaboration à distance nécessitent une connexion Internet. Vérifiez les licences, les profils activés et la formation incluse avant la mise en service. [1, 9]

Le détail commence ici.

Une architecture dédiée à l'image, dans le format d'une sonde portable. [1, 2]

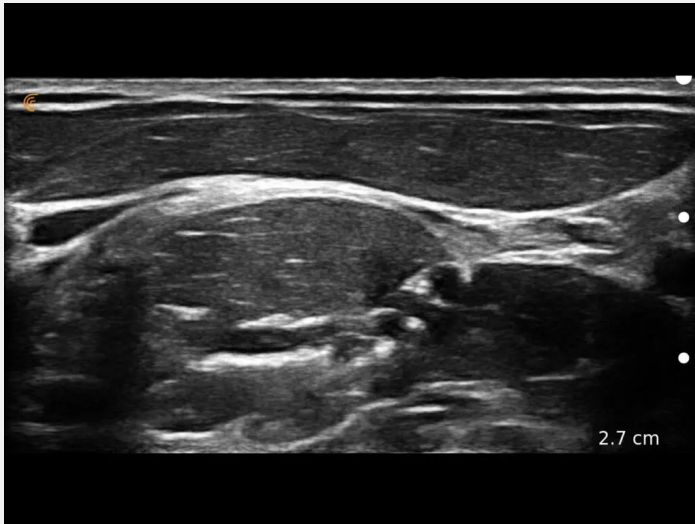

Plexus brachial interscalénique ; galerie clinique Clarius. [10]

192

éléments piézoélectriques

8

formateurs de faisceau
Octal Beamforming

Une large fenêtre superficielle

Le L15 associe une plage de 5 à 15 MHz à un champ de vue de 50 mm. Sa profondeur maximale de 7 cm le destine notamment aux tissus mous et aux petites articulations. Cette large empreinte linéaire aide à réunir plusieurs repères anatomiques dans une même coupe. [1, 9]

Des réglages assistés

La technologie HD3 associe des éléments piézoélectriques et huit formateurs de faisceau. Le traitement automatique de l'image et les préréglages fournissent un point de départ pour l'examen. Le praticien adapte ensuite le gain, la profondeur et le mode à l'anatomie observée. [1, 2, 9]

Les modes au service de l'examen

B et M

Imagerie en niveaux de gris et représentation du mouvement dans le temps.

Couleur et puissance

Visualisation des signaux Doppler, en complément de l'analyse anatomique.

Doppler pulsé*

Analyse spectrale des flux dans une zone sélectionnée. [3, 9]

* Fonction avancée soumise à l'offre logicielle. Détail des inclusions en page 11.

Une place dans votre pratique.

Une sonde destinée aux structures superficielles et aux petites articulations. [1, 4]



Exemple d'utilisation clinique présenté par Clarius. [4]

Musculosquelettique

Explorer les tendons, muscles, articulations et tissus mous ; documenter leur aspect au cours de l'examen. Le L15 est présenté pour l'orthopédie, la médecine du sport, la rééducation et la rhumatologie. [1, 4]

Nerfs et guidage

Repérer l'anatomie nerveuse et visualiser une cible lors de gestes échoguidés. Les préréglages nerf et douleur complètent les profils musculosquelettiques ; l'amélioration de visibilité de l'aiguille fait partie des fonctions avancées. [9]

Sein et petits organes

La fiche du L15 cite notamment le sein et la thyroïde parmi les applications. Les outils T-Mode présentés pour la gamme aident à reconnaître certaines anatomies, selon la version logicielle et les autorisations locales. [1, 9]

Un profil par articulation

Main et poignet, pied et cheville, genou, épaule, coude, hanche et cuisse : plusieurs préréglages orientent les premiers réglages. Le praticien conserve la maîtrise du gain, de la profondeur et du mode. [9]

Les outils d'assistance disponibles

MSK AI et Median Nerve AI proposent des aides à l'identification et à la mesure. Le T-Mode couvre notamment le genou antérieur et la coiffe des rotateurs. Vérifiez les outils autorisés dans votre région. [9]

Pour quelles spécialités ?

Correspondance entre les spécialités et les applications publiées par Clarius. Les exemples ci-dessous précisent les usages de ce modèle. [1, 4, 9]

Le profil du L15 HD3

Une large fenêtre linéaire pour les tendons, les nerfs, les petites articulations et les tissus superficiels.

SPÉCIALITÉS / DOMAINES	EXEMPLES D'UTILISATION
Orthopédie et médecine du sport	Exploration des muscles, tendons et articulations ; profils épaule, genou, coude, pied, cheville, main et poignet. [4, 9]
Médecine physique et réadaptation Rhumatologie	Documentation des tissus mous et des structures périarticulaires dans l'évaluation et le suivi musculosquelettiques. [4]
Anesthésie et médecine de la douleur	Repérage des nerfs périphériques et des cibles de gestes échoguidés ; préréglage nerf et douleur. [1, 9]
Radiologie et sénologie	Imagerie du sein, des petits organes et des tissus superficiels ; calculs dédiés au sein mentionnés par Clarius. [1]
Endocrinologie Imagerie thyroïdienne	Exploration de la thyroïde, application explicitement citée pour le L15 ; outils T-Mode selon le logiciel. [1, 9]
Accès vasculaire	Repérage des vaisseaux superficiels et visualisation anatomique pour le guidage, avec les modes Doppler disponibles. [1]

Pour préparer votre choix

À privilégier dans la démonstration : vos tendons, nerfs et articulations cibles. Le champ de 50 mm et la profondeur maximale de 7 cm caractérisent cette sonde. [1, 9]

Les profils de votre sonde.

Préréglages explicitement listés pour ce modèle dans la boutique Clarius, regroupés par région ou usage et traduits en français. [9]

Membre supérieur

Main / poignet ; épaule ; coude.

Profils destinés aux articulations, tendons et tissus mous du membre supérieur.

Membre inférieur

Pied / cheville ; genou ; région plantaire.

Réglages initiaux pour l'exploration des structures articulaires et périarticulaires.

Hanche et cuisse

Hanche et cuisse (Hip & Thigh).

Profil de région à adapter à la cible et à la profondeur utile du L15.

Musculosquelettique

MSK.

Profil général pour l'examen des muscles, tendons et autres tissus mous.

Nerfs et douleur

Nerf / douleur (Nerve/Pain).

Repérage anatomique et acquisitions destinées aux gestes échoguidés.

Chirurgie plastique

Plastic Surgery.

Profil de spécialité annoncé dans l'offre du modèle.

Mesures et applications complémentaires

La fiche produit cite également le sein, la thyroïde, les petits organes, le superficiel et l'accès vasculaire. Des packages de calcul vasculaire et sein sont indiqués. [1, 9]

Comprendre chaque fonction.

Les modes et outils ci-dessous sont publiés pour le L15 HD3. Leur activation dépend de l'offre et de la région. [1, 3, 9]

B et M

Le mode B représente l'anatomie en niveaux de gris. Le mode M montre le mouvement des structures le long d'une ligne au cours du temps.

Couleur et puissance

Ces modes représentent les signaux de flux et complètent l'image anatomique. Le gain et les réglages Doppler sont adaptés à l'acquisition.

Doppler pulsé

Il fournit une représentation spectrale du flux dans une zone sélectionnée. Cette fonction avancée figure dans l'offre logicielle du modèle.

Relecture ciné : une boucle de 30 secondes est annoncée pour revoir les acquisitions. [9]

Les aides d'intelligence

MSK AI : aide à l'identification et à la mesure de tendons.

Median Nerve AI : aide à l'identification et à la mesure du nerf médian.

T-Mode : thyroïde, genou antérieur, coiffe des rotateurs, BBL, sein et paroi abdominale. [4, 9]

Comparer et documenter

Needle Enhance : amélioration de visibilité de l'aiguille.

Split Mode : comparaison d'acquisitions.


Élastographie : fonction d'imagerie complémentaire des propriétés mécaniques des tissus, selon le logiciel. [1, 3, 9]

Les commandes vocales

Gel d'image, gain, profondeur, changement de mode et captures : la voix complète les commandes tactiles. Les langues disponibles et les fonctions accessibles sont à vérifier dans votre configuration. Le partage, le Cloud et les exports sont détaillés pages 8 et 9. [6, 9]

L'examen, du bout des doigts.

Des commandes tactiles et des fonctions avancées pour organiser votre acquisition. [1, 3, 6]

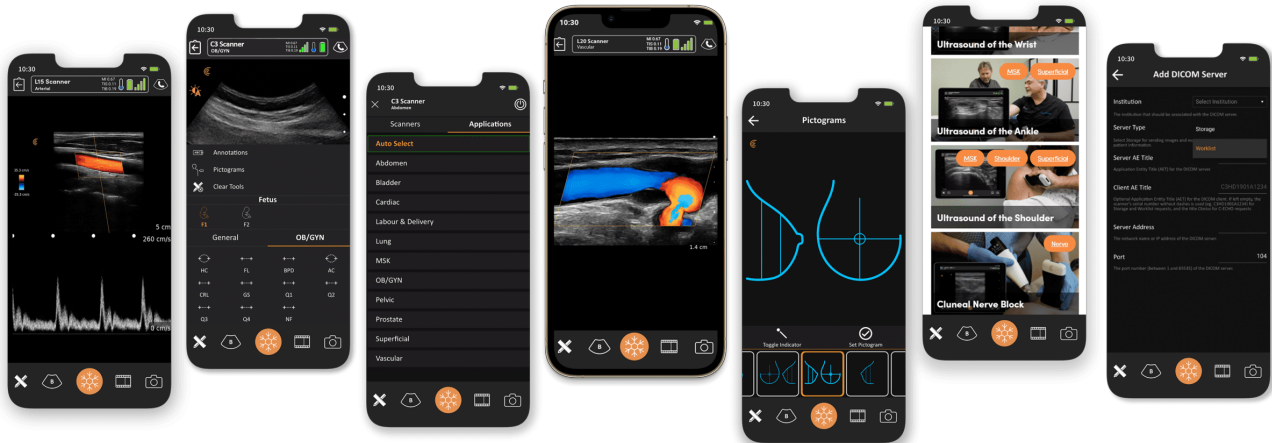

Interfaces de la gamme Clarius ; écrans variables selon le logiciel et la sonde.

01 Ajuster

Sélectionnez le préréglage adapté. Les commandes tactiles permettent de choisir le mode, de zoomer et d'ajuster le gain et la profondeur. Deux boutons programmables sont intégrés à la sonde. [1, 9]

02 Comparer*

L'écran partagé permet de confronter plusieurs acquisitions, de réaliser des mesures et de comparer différentes coupes anatomiques. Les outils disponibles varient selon la sonde et le logiciel. [3, 9]

03 Documenter*


Les fonctions de capture et d'enregistrement permettent de conserver des images et des séquences. L'enregistrement des procédures associe la caméra du mobile et l'écran, selon les options disponibles. [3, 9]

Gardez les mains sur votre geste.*

Les commandes vocales donnent accès au gel d'image, au gain, à la profondeur, à la capture d'images ou de vidéos et au changement de mode. Elles réduisent les manipulations de l'écran pendant l'examen. Vérifiez les langues prises en charge. [6, 9]

Acquérir. Retrouver. Partager.

Clarius Cloud prolonge le travail réalisé sur le mobile, avec les services de l'offre choisie. [5, 9]

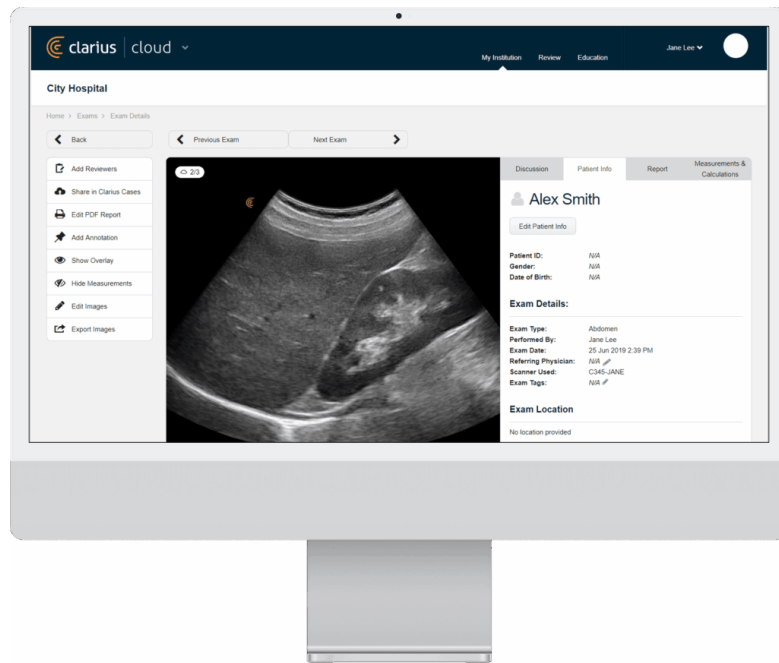

Retrouver vos examens

Le Cloud permet de conserver les examens, d'ajouter des annotations et de préparer des rapports. Les dossiers sont accessibles depuis un navigateur sur téléphone, tablette ou ordinateur, avec une connexion Internet. [5]

Sécurité des liaisons : Wi-Fi : TLS 1.2 ; Bluetooth : AES128 et RSA4096. [9]

Organiser et archiver

Le stockage Cloud illimité est annoncé dans l'offre Clarius Essentials. Les outils de rapport permettent de produire des PDF pour l'impression ou l'archivage. Le fabricant indique que les données sont chiffrées. [5, 9]

Partager après l'examen

Partagez les acquisitions avec un confrère ou une équipe depuis les outils Clarius. Le partage d'examens désidentifiés permet la revue et la discussion des images, selon les droits et les services activés. [3, 5]

Collaborer pendant l'acquisition

Clarius Live permet à des participants invités de visualiser un examen à distance. La disponibilité de ce service, les possibilités de partage et la connexion Internet doivent être vérifiées avant la session. [3, 9]

Intégration DICOM : vérifiez les licences requises, la configuration du serveur et les formats d'export. Les fonctions Cloud, de stockage local et d'intégration dépendent de l'offre souscrite. [1, 9]

Pensé pour le quotidien.

Un format compact, une recharge sur socle et des accessoires pour votre organisation. [1, 7]



Sonde étanche IP67 ; illustration de la gamme.



Exemple de housse pour L15 HD3.

Nettoyage et protection

Le boîtier est annoncé IP67 et immersible pour la désinfection. La conception sans câble permet de recouvrir la sonde d'une housse adaptée. Utilisez les produits compatibles et suivez les instructions du fabricant pour le nettoyage, la désinfection et les protections. [1, 9]

Une autonomie à planifier

La batterie rechargeable intégrée est associée à un socle de charge. Les durées annoncées sont indicatives et varient selon l'usage. Prévoyez les recharges entre les consultations ou les sessions de formation ; les valeurs techniques sont regroupées en page 11. [1, 9]

Compléter votre équipement

Power Fan HD3

Cet accessoire ajoute un refroidissement actif et une alimentation externe par USB. Il se raccorde à une prise ou à une batterie externe pour prolonger les sessions. Confirmez la compatibilité et le montage pour votre modèle lors du devis. [7]

Transport et installation

Clarius présente des solutions de transport, des chargeurs supplémentaires, des supports et des protections. Choisissez les références adaptées à la forme de la sonde, à votre appareil mobile et à votre environnement de travail. [7]

Accessoires proposés séparément ; références, compatibilité et disponibilité à confirmer lors du devis.

Tous les repères techniques.

Données du L15 HD3. Conditions commerciales à confirmer localement. [1, 9]

Type / fréquence	Linéaire haute fréquence / 5-15 MHz
Profondeur / champ de vue	7 cm max. / 50 mm
Dimensions / masse	147 × 76 × 32 mm / 290 g
Éléments / commandes	192 éléments / 2 boutons programmables
Modes de base	B, M, Doppler couleur et puissance
Autonomie / recharge	Environ 60 min / environ 90 min
Veille / démarrage	Environ 7 jours / généralement < 30 s ¹
Durée d'examen recommandée	20 min maximum selon la fiche produit
Systèmes mobiles annoncés ²	iOS 16+ ; Android 13+ ; hors ChromeOS
Liaisons sans fil	Wi-Fi 802.11n à 5 GHz ; BLE 4.0
Images / séquences vidéo	JPEG, PNG, BMP, DICOM / DICOM, MP4
Stockage / intégration	Cloud, export local et DICOM selon offre

¹ Selon la plateforme. ² Vérifiez la liste des appareils compatibles. Les fonctions MSK AI et Median Nerve AI dépendent des autorisations locales. Les durées sont indicatives ; la notice prévaut pour les conditions d'emploi.

Conditions ambiantes publiées : 0 à 40 °C ; humidité relative de 15 à 90 %. [9]

Avec la sonde

Modes de base, chargeur et support produit. La boutique annonce une garantie standard de 3 ans et un retour sous 30 jours. Confirmez les conditions du contrat et leur application dans votre pays. [9]

Clarius Essentials*


Logiciel de spécialité, formation, mises à jour, outils d'IA, commandes vocales, Doppler pulsé, utilisateurs et stockage Cloud illimités : inclusions annoncées, variables selon le modèle et le pays. [9]

* Demandez un devis précisant les licences, leur durée, les fonctions avancées et les services disponibles. Les prix et les modalités de souscription varient selon le marché.

Découvrez-le dans votre pratique.

Préparez une démonstration autour de vos examens habituels, de votre appareil mobile et de vos besoins de partage.

Consulter le produit et demander une démonstration

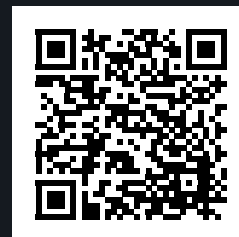

Préparer la démonstration

Testez les tendons, les nerfs et les petites articulations. Évaluez la qualité d'image, les modes Doppler, la connexion avec votre mobile et les exports. Faites préciser les fonctions incluses ainsi que le coût de la sonde, des licences et des accessoires.

Accompagner la prise en main

L'offre présentée en boutique comprend une séance virtuelle de prise en main d'une heure, des formations mensuelles en ligne et les vidéos Clarius Classroom dans l'application. Vérifiez les contenus adaptés à votre spécialité, leur langue et les conditions locales d'accès. [8, 9]

Sources et crédits

Documents officiels consultés le 12 octobre 2026. Liens cliquables.

[1] Fiche produit L15 HD3

[2] Technologie et qualité d'image

[3] Fonctions avancées

[4] Applications musculosquelettiques

[5] Clarius Cloud

[6] Commandes vocales

[7] Accessoires HD3

[8] Formation Clarius Classroom

[9] Offre et spécifications en boutique

[10] Galerie clinique Clarius

Visuels : Clarius, pages produit, spécialités, logiciel, Cloud et galerie clinique. Interfaces à titre d'exemple ; certaines fonctions ou anatomies affichées concernent la gamme Clarius. Les images ne préjugent pas du résultat d'un examen.

Brochure de présentation indépendante rédigée en français à partir des informations du fabricant. Destinée aux professionnels de santé. Elle ne remplace pas la notice d'utilisation. Disponibilité, fonctionnalités et conditions de vente à confirmer auprès de Clarius ou du distributeur.